


Lid Retractors 開瞼鉤, 未熟児鉤

■デマル開瞼鉤

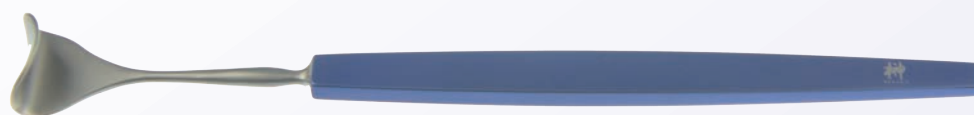

デマル開瞼鉤

品番	規格/形状	標準価格(税抜)
SOT-7001	大 17mm	¥ 25,000
SOT-7002	中 14mm	¥ 25,000
SOT-7003	小 11mm	¥ 25,000
SOT-7004	極小 8mm	¥ 25,000



■未熟児鉤



未熟児鉤

品番	規格/形状	標準価格(税抜)
SOT-5060	119mm	¥ 30,000



SUS420J2 と Ti-6Al-4V の比較

材質	物理的性質				機械的性質			
	比重 (g/cm ³)	ヤング率 (縦弾性係数) (GPa)	比熱 (cal/cm ² °Csec)	線膨張 係数	ひっぱり 強さ (MPa)	耐力 (MPa)	伸び (%)	ビッカース 硬さ
SUS420J2	7.78	204	0.11	11.7	540以上	225以上	18以上	235以下
Ti-6Al-4V	4.43	106	0.018	8.8	980	920	14	320
Ti-6Al-4VELI	4.43	106	0.018	8.8	980	920	14	320

チタン材はステン材と比べ、

- ・約半分の軽さ
- ・熱が加わっても伸びにくい
- ・熱が伝わりにくい
- ・ひっぱる力に強い
- ・破壊強度が約倍ほどあり、強靱
- ・硬度が高い

チタンはステンレスに比べ、滅菌処理時に加熱・加圧されても変形度合が少ないため、「切る」「掴む」「挟む」等の基本機能が損なわれる恐れが少ないです。